

GCV 4010 X - 361 L



## LES PLUS PRODUITS




Système frigorifique indépendant avec 2 moteurs. Refroidissement ventilé haute performance +1°C à +15°C. Fonctionnement en ambiance jusqu'à +40°C.



Affichage digital de la température de chaque compartiments. Alarmes porte et température (visuelle et sonore) et verrouillage de la commande. Commande marche/arrêt indépendante pour chaque compartiments.



Important volume de stockage en froid positif et négatif sur un encombrement au sol réduit. Grilles renforcées en acier plastifié charge max 45kg.

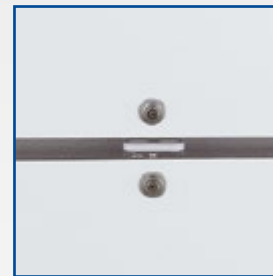

Fermeture à clé des portes avec 2 serrures indépendantes.

## DEFINITION

- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 55 mm sur réfrigérateur et 70 mm sur congélateur.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Réfrigérateur avec 3 grilles acier plastifié et congélateur avec 3 paniers.
- Portes réversibles avec serrures et rappel automatique.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.

## OPTIONS

- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lxpxh)240x90x160mm


## TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé +1° à +15°C (réfrigérateur) et statique -28° à -14°C (congélateur) (non qualifiable en performance labo)
- Système frigorifique indépendant avec 2 moteurs et 2 régulations.
- Régulation électronique avec alarmes porte et température.
- Régulation protégée sous lexan.
- Réglage du niveau d'hygrométrie (bas ou élevé).
- Dégivrage entièrement automatique sur partie réfrigérateur et manuel sur partie congélateur.
- Fluide propre R-600a.
- Classe climatique 5 (+40°C).


## ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

## RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

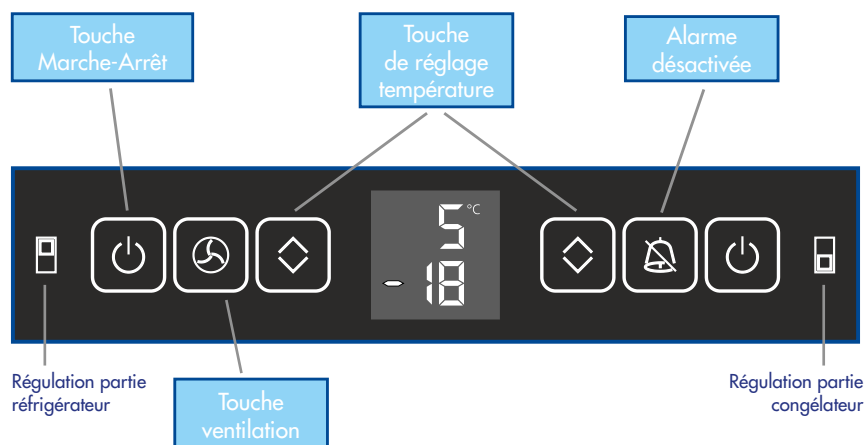

## ERGONOMIE

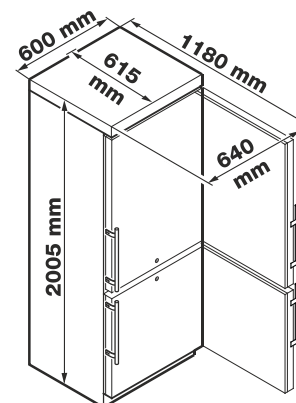

- Largeur réduite 600 mm
- Portes pleines réversibles avec serrures
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GCV 4010 X	
Volume brut/utile (l.) Total	361/345
Réfrigérateur	254/240
Congélateur	107/105
Plage de réglage de la température (réfrigérateur/congélateur)	+1° à +15°C / -28° à -14°C
Hygrométrie	65 - 75%
Refroidissement (réfrigérateur/congélateur)	ventilé/statique
Dégivrage (réfrigérateur/congélateur)	automatique/manuel
Évaporateur (réfrigérateur/congélateur)	arrière vertical/périphérique
Condenseur	statique
Fluide	R-600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	260
Consommation électrique (kWh/24h)	1,3
Dégagement calorifique (W/h)	111
Classe climatique	5 (+40°C)
Niveau sonore (dBA)	52
<b>Équipement</b>	
Réfrigérateur : Type	grilles acier plastifié
Nb / dimensions (lpx) (mm)	4 / 478x420
Nb max / hauteur de réglage (mm)	25 / 32
Charge admissible par tablette (kg)	45
Congélateur : Type	tiroirs transparents sur tablettes verre
Nb / dimensions (lpx) (mm)	2 / 445x404x156 + 1 / 445x257x165
Charge admissible par tiroir/tablette (kg)	24
Charge admissible par appareil (kg)	220
<b>Dimensions / Poids</b>	
Appareil (lpxh) (mm)	600x615x2000
Cuve (lpxh) (mm) (réfrigérateur/congélateur)	440x435x1105 / 431x435x597
Emballé (lpxh) (mm)	620x709x2055
Poids brut/net (kg)	88 / 82

<sup>1</sup> Appareils non qualifiables