

LGX 823 - 70 L
 LGP 1376 - 106 L



LGX 823

LES PLUS PRODUITS




Régulation électronique PowerC
 (voir détail)



Passage de cuve Ø 30mm
 pour caractérisation/
 qualification sur site,
 positionné sur la porte à 1/3
 du haut.



Passage de cuve Ø 15mm
 pour sonde GTC (Gestion
 Température Centralisée)
 PT100 ou numérique

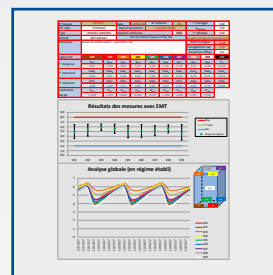

Chaque appareil est livré
 avec sa cartographie de
 contrôle et réglage 9 points.
 Caractérisation effectuée
 d'après la norme FD X15-140
 en température d'air pour une
 ambiance de 22°C

CONSTRUCTION

- Refroidissement statique $-22^{\circ}\text{C} \pm 7^{\circ}\text{C}$
- Dégivrage manuel
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 60mm
- Porte avec sens d'ouverture réversible
- Équipée de tiroirs transparents sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace) charge max 24kg

OPTIONS

- OP 1/1 : serrure
- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lpxh) 150x60x100mm
- OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lpxh)240x90x160mm

RÉGULATION



- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 1°C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse sonore et visuelle
- Alarme ouverture de porte sonore et visuelle
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date, de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date, de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi

ACCESSOIRES

- Enregistreur mobile EJ 32 IN

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

ERGONOMIE

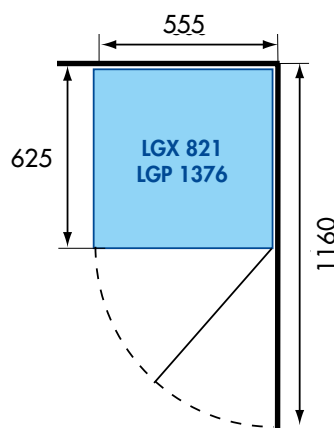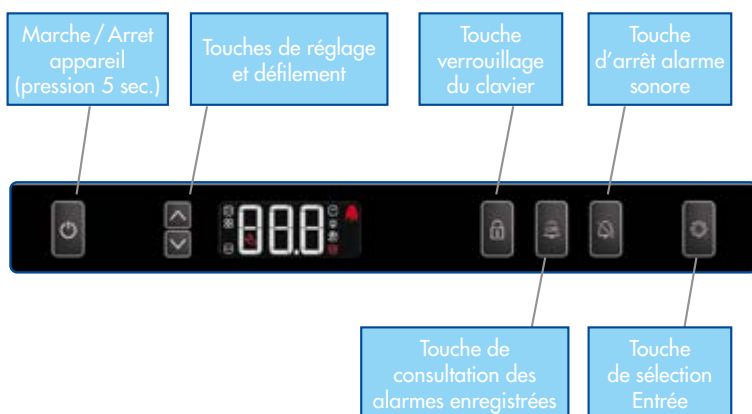

- LGX 823 dimensions réduites peut se placer sur paillasse
- Hauteurs 630 & 850 mm - peuvent se placer sous paillasse
- Largeur réduite 555 mm
- Porte pleine réversible (avec serrure en option)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LGX 823	LGP 1376
Volume brut/utile (l.)	70/68	106/103
Homogénéité de la température ¹	- 22°C ± 7°C	- 22°C ± 7°C
Plage de réglage de la température	-5° à -25°C	-5° à -25°C
Résolution & réglage	1°C	1°C
Refroidissement	statique	statique
Dégivrage	manuel	manuel
Évaporateur	périphérique	périphérique
Condenseur	statique	statique
Fluide	R600a	R600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,52	0,45
Dégagement calorifique (W/h)	180	180
Classe climatique	7 (+35°C)	7 (+35°C)
Niveau sonore (dBA)	43	40
Équipement		
Type	Tiroirs transparents sur tablettes verre	Tiroirs transparents sur tablettes verre
Nb / dimensions (lxpxh) (mm)	1 / 385x340x150 + 1 / 385x180x200	3 / 360x375x135 + 1 / 360x230x140
Charge admissible par tiroir/tablette (kg)	24	24
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	555x625x630	555x625x850
Cuve (lxpxh) (mm)	440x410x410	395x430x660
Emballé (lxpxh) (mm)	567x711x831	567x711x1051
Poids brut/net (kg)	38/30	50/42

¹ appareil tête de série qualifié selon FD X15-140 - en température d'air pour une ambiance 22°C.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.