

GEX 823 - 70 L
GEX 5216 - 513 L



GEX 823



GEX 5216

LES PLUS PRODUITS



Cuve sécurisée pour stockage de produits volatiles non corrosifs.



Affichage digital de la température et alarmes température visuelles et sonore (GEX 5216).



Fluide propre R-600a, conformité F-Gaz

CONSTRUCTION

- Refroidissement statique:
 - GEX823: -25°/-18°C *
 - GEX5216: -28°/-14°C *
- Dégivrage manuel
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant (GEX5216)
- Pieds de mise à niveau à l'avant (GEX823)

*non qualifiables en performances labo


OPTION

- OP 1 : serrure
- OP 9 : passage Ø 15 mm pour sonde GTC

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage digital, alarmes porte et température (visuelle et sonore), fonction SuperFrost et sécurité enfant sur modèle GEX5216
- Régulation électronique avec affichage LCD et alarme température (visuelle) sur modèle GEX823
- Fluide R-600a

ÉRGONOMIE

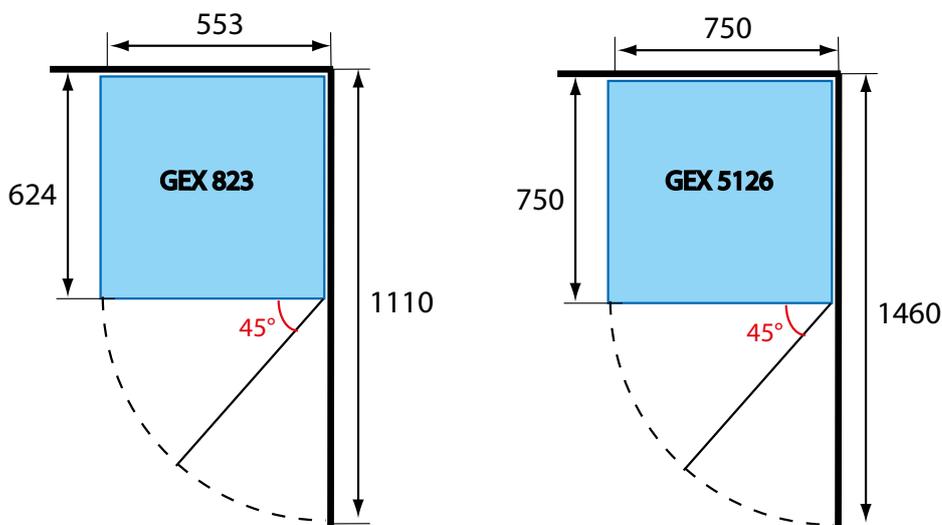

- Porte réversible
- Serrure en option

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GEX 823	GEX 5216
Volume brut/utile (l.)	70/68	513/472
Température*	-25°/-18°C	-28°/-14°C
Refroidissement		statique
Dégivrage		manuel
Évaporateur	périphérique (Smart Frost)	plaques
Condenseur		statique
Fluide		R-600a
Alimentation 230 V - 50Hz (W)	100	180
Consommation électrique (kWh/24h)	0,47	1,05
Dégagement calorifique (W/h)	180	108
Classe climatique	7 (+35°C)	4 (+30°C)
Niveau sonore (dBA)	41	45
Équipement		
Tiroirs transparents (nombre)	2	14
Dim. Tiroirs sup. (lxpxh) (mm)	385x340x150	275x520x185
Dim. Tiroir inf. (lxpxh) (mm)	385x180x200	275x325x210
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	555x625x630	750x750x1725
Cuve (lxpxh) (mm)	440x410x410	607x560x1510
Emballé (lxpxh) (mm)	567x711x831	769x835x1930
Poids brut/net (kg)	38/30	116/102

* Appareils non qualifiables