DÉMARRAGE RAPIDE Bio Guard


QUICK START

Température ambiante de fonctionnement Ambient operating temperature **Min** + 18°C **Max** + 32°C


1 Prévoir **200 mm** minimum d'espace autour de l'appareil.
Allow a minimum of **200mm** of space around the appliance.



2 Ajuster les **pieds vérins**.
Adjust the **leveling feet**.

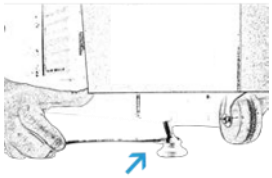

3 Vérifier la présence du **filtre condenseur**.
Check for the presence of the **condenser filter**.

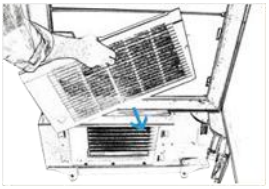

ATTENTION : pour éviter d'endommager l'appareil et garantir un fonctionnement optimal, il est impératif de respecter la séquence d'opérations détaillée ci-dessous.
Caution: To avoid damaging the device and ensure optimal operation, it is essential to follow the sequence of operations detailed below.


4 Brancher l'appareil sur le **réseau électrique** (230V/16a).
Connect the appliance **to the mains** (230V/16A).



5 Actionnez l'interrupteur situé à l'arrière pour alimenter le congélateur en **230 V**, puis ouvrez la porte inférieure à l'avant de l'appareil pour activer l'interrupteur **d'alimentation 24 V**.
Flip the switch located at the rear to **supply 230 V** power to the freezer, then open the lower door at the front of the unit to **activate the 24 V power switch**.



6 L'IHM affiche les paramètres d'usine : langue **anglaise** et température de consigne de **-80 °C**.
The HMI displays the factory settings: **English** language and a setpoint temperature of **-80°C**.

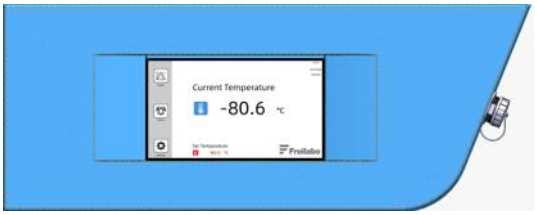

7 Si ces réglages conviennent, laissez le congélateur atteindre la température de consigne avant de le remplir. Dans le cas contraire, consultez le manuel d'utilisation pour effectuer les modifications nécessaires.
If these settings are suitable, allow the freezer to reach the set temperature before filling it. Otherwise, consult the user manual to make the necessary adjustments.

ATTENTION: LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS PEUT ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL. WARNING: Failure to follow the instructions above may damage your device.

Se reporter au « Manuel utilisateur » fourni avec l'appareil pour plus d'informations. Refer to « User manual » provided with the unit for more information.

Froilabo
Precision for life